

CLEARFIL™ AP-X EstheticsFlow

Compósito Fluido Universal

RESTAURAÇÕES ALTAMENTE ESTÉTICAS

BRILHO NATURAL INSTANTÂNEO E DURADOURO
AMPLA GAMA DE APLICAÇÕES



CLEARFIL™ AP-X Esthetics Flow

Seu Compósito Fluido Universal vencedor do Top Award Winner por 4 anos consecutivos.

- ✓ alta retenção do brilho
- ✓ fácil de polir
- ✓ restaurações duráveis
- ✓ ampla gama de aplicações



EXCEPCIONALMENTE FÁCIL DE POLIR BRILHO NATURAL INSTANTÂNEO E DURADOURO

As partículas de carga submicrométricas especiais (0,18m a 3,5m) se unem e permanecem juntas ao longo do tempo, graças ao agente de união silano patenteado pela Kuraray Noritake Dental, criando um brilho excelente na superfície da restauração e tornando-a extremamente fácil de polir.



CLEARFIL™ AP-X
Esthetics Flow



Competidor 1




Competidor 2




Competidor 3

Brilho (%)¹

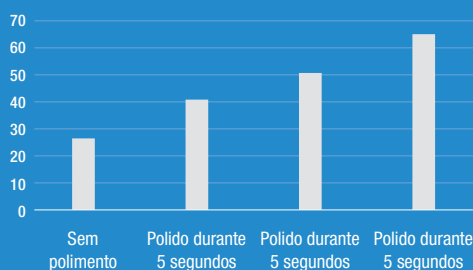


Teste de desgaste com escova de dentes

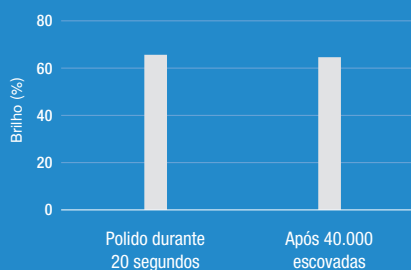

Fonte dos dados: Kuraray Noritake Dental Inc.

FÁCIL MANIPULAÇÃO E NÃO PEGAJOSO

- Partículas de carga em diferentes tamanhos e formas proporcionam características únicas ao compósito, melhorando notavelmente a manipulação e escultura.
- Consistência não pegajosa
- Mecanismo interno da seringa e o design da ponta aplicadora metálica dificultam incorporação de ar ao dispensar o compósito.

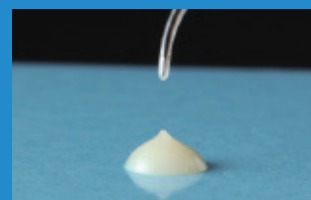

EXCELENTES PROPRIEDADES MECÂNICAS


Alta concentração das partículas de carga (75 wt%, 59 vol%) tornam o compósito adequado também para restaurações em dentes posteriores.

Resistência à Flexão² : 151 MPa Resistência à Compressão² : 373 MPa



Imagens cortesia do Dr. Keiichi Hosaka


Comparação de resistência à flexão ^{1,2}

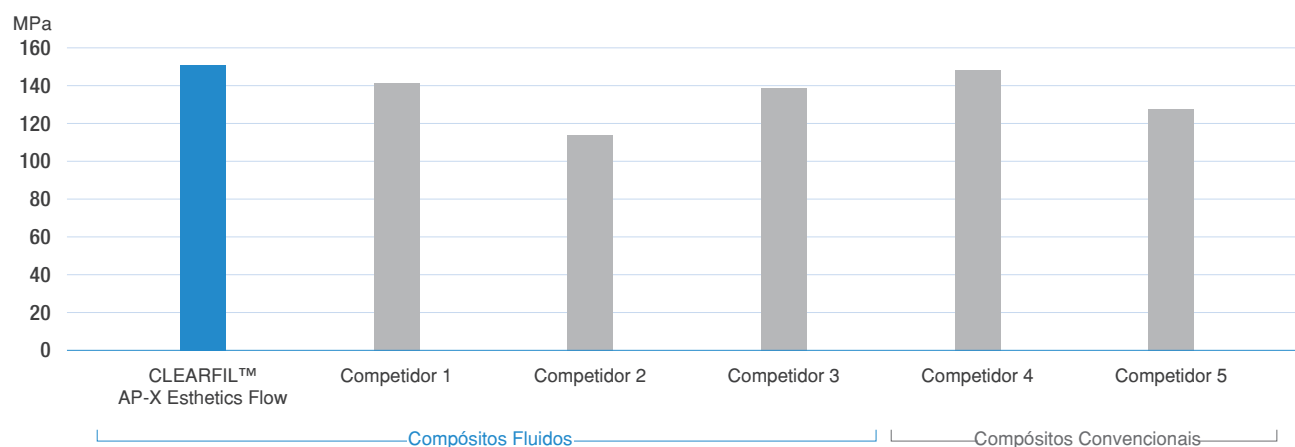


1, 2 De acordo com ISO 4049: 2009. 1, 2 Fonte: Kuraray Noritake Dental Inc.

DIFUSÃO DE LUZ PARA ESTÉTICA SEMELHANTE À NATURAL

Difusão de luz refere-se à capacidade de um material espalhar e refletir raios de luz em muitos ângulos diferentes, de maneira a mimetizar os dentes naturais. O efeito luminoso das partículas de carga em agrupamentos de difusão de luz incorporados em CLEARFIL™ AP-X Esthetics Flow proporciona uma maior adaptação da cor, mesclando-se com a estrutura dental e criando restaurações altamente estéticas.

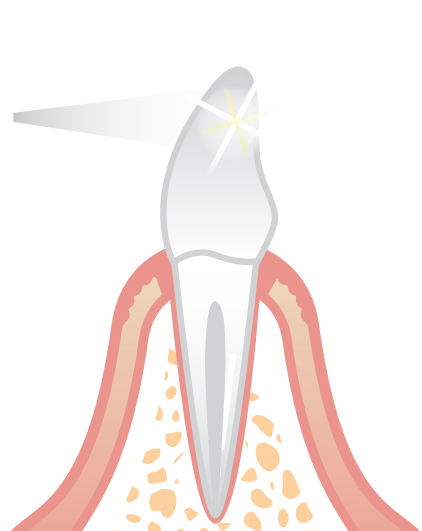

O dente natural absorve a luz e a difunde em todas as direções. As partículas de carga difusoras de luz da Kuraray difundem a luz de maneira semelhante.

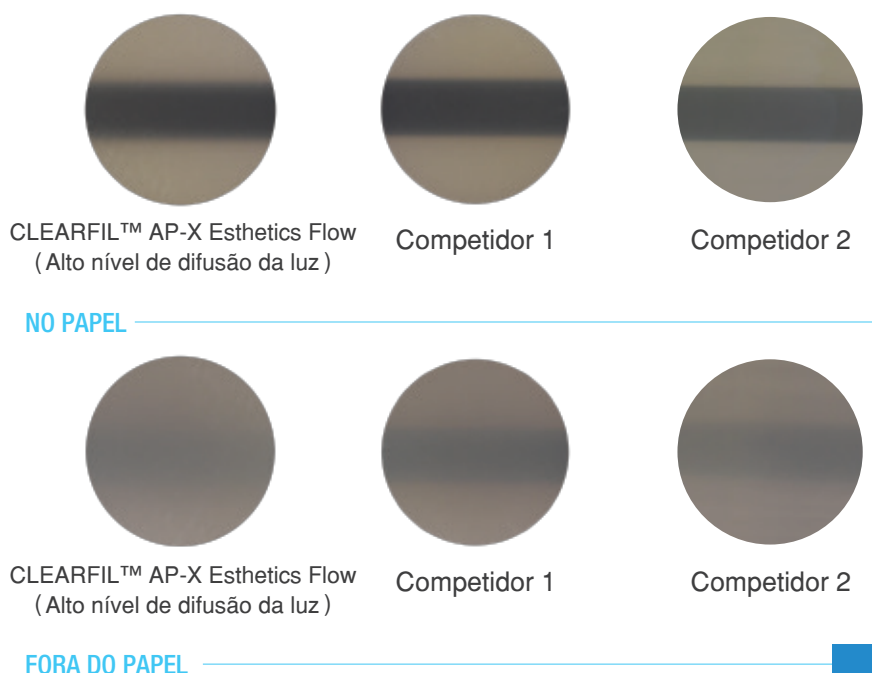

PASSOS CLÍNICOS FÁCEIS E AMPLA GAMA DE APLICAÇÕES



1. Preparar a cavidade.



2. Aplicar o adesivo de acordo com as instruções do fabricante.



3. Dispensar e esculpir o CLEARFIL™ Esthetics Flow.



4. Polir a restauração.


Imagens cortesia do Dr. Hirofumi Tashiro

Indicações:

- Restaurações diretas para todas as classes de cavidade, lesões cervicais (por ex., cáries radiculares, lesões cervicais não cariosas), desgaste dos dentes e erosão dentária
- Base/revestimento da cavidade
- Correções da posição e forma dos dentes
- Reparos intra-orais de restaurações fraturadas



CORES DISPONÍVEIS

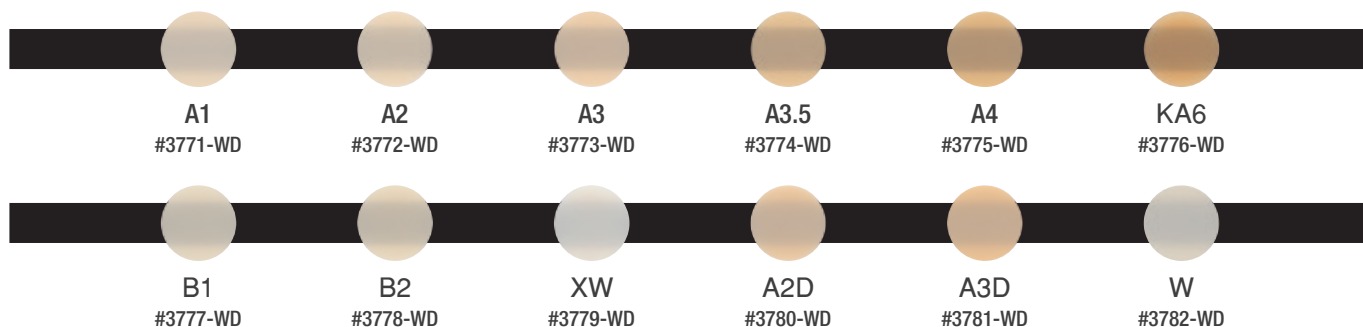

PRODUTOS RELACIONADOS

PONTAS

#3785-WD

20 pontas



SHADE GUIDE**

#3840-WD

Escala de cores completa

SHADE GUIDE COMPACT**

#3741-WD

A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, XW, W

** Compatível com CLEARFIL™ AP-X ES-2 e CLEARFIL™ AP-X ESTHETICS Flow



Kuraray Noritake Dental Inc.

1621 Sakazu, Kurashiki, Okayama 710-0801, Japan

Website www.kuraraynoritake.com

- Leia as Instruções de Uso fornecidas com o produto antes de utilizar.
- As especificações e a aparência do produto estão sujeitas a modificações sem aviso prévio.

"CLEARFIL" é uma marca comercial da KURARAY CO., LTD

Importado no Brasil por:

KURARAY SOUTH AMERICA LTDA.

Av. Paulista Nº 1636, sala 405, Bela Vista, CEP: 01310-200-São Paulo/SP

CNPJ 12.333.284/0001-17

Responsável Técnico: Luiz Augusto Vieira - CRF/SP 30996

Registro ANVISA Nº: 81777919004