

kuraray

Noritake



CATÁLOGO DE
PRODUTOS

CHAIRSIDE

Produtos para dentistas

Kuraray Noritake Dental Inc.

01

CLEARFIL™ SE BOND

Adesivo
Autocondicionante

CLEARFIL™ SE BOND



CLEARFIL™ SE BOND é sistema adesivo bicomponente com primer autocondicionante à base de água e adesivo fotopolimerizável contendo monômero patenteado MDP inventado pela Kuraray. A sensibilidade da técnica com o CLEARFIL™ SE BOND é significativamente reduzida, ao mesmo tempo em que proporciona maior resistência à adesão e propriedades de vedação, tornando-se o padrão ouro dos agentes de adesão.

CLEARFIL™ SE BOND Kit

#1970-WD

Primer (6 ml), Adesivo (5 ml), 50 pontas aplicadoras tipo pincel descartáveis + 2 cabos (1 preto e 1 branco) para ponta aplicadora tipo pincel + 1 prato de mistura + 1 placa de bloqueio de luz + 1 estojo exterior para fácil dispensação.



mais informações

CLEARFIL™ SE BOND

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Alta resistência de união

VANTAGENS PARA DENTISTAS E PACIENTES

- ✓ Excelente selamento marginal a longo prazo
- ✓ Alta estabilidade e durabilidade ao longo do tempo
- ✓ Menor risco de cáries secundárias

Condicionamento suave

- ✓ Menor sensibilidade pós-operatória
- ✓ Excelente resistência de união devido a adesão química do monómero MDP aos cristais de hidroxiapatita restantes ao redor da rede de fibras de colágeno

Baixa sensibilidade a técnica

- ✓ Alta tolerância a erros
- ✓ Sem passo de lavagem: Procedimento sem umidade e das fibras de colágeno exposto



01

CLEARFIL™
SE BOND

Adesivo
Autocondicionante



02

*CLEARFIL™
TRI-S BOND
Universal Quick*

Adesivo Universal

CLEARFIL™ TRI-S BOND Universal Quick



CLEARFIL™ TRI-S Bond Universal Quick é um adesivo universal de componente único, fotopolimerizável, com liberação de flúor, indicado para restaurações diretas e indiretas em combinação com todas as técnicas de condicionamento (Total-Etch, Self-Etch e Selective-Etch). CLEARFIL TRI-S Bond Universal Quick também é indicado para o tratamento de superfície de zircônia e cerâmica de vidro à base de sílica (por exemplo, dissilicato de lítio).

CLEARFIL™ TRI-S BOND Universal Quick Standard Kit

#4400-WD

Adesivo 5ml + 1 seringa do Gel de Ácido Fosfórico K-etchant de 3ml + 1 Placa de bloqueio de luz + 1 Placa para dispensação + 20 Pontas de Agulha + 50 Pontas aplicadoras.



mais informações

CLEARFIL™ TRI-S BOND Universal Quick

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

VANTAGENS PARA DENTISTAS E PACIENTES

1. Procedimento rápido


- ✓ O novo monômero AMIDE penetra rapidamente à dentina e ao esmalte, eliminando o tempo de espera.
- ✓ Risco de contaminação reduzido
- ✓ Não é necessário esfregar por 20 segundos

2. Multi-uso

- ✓ Compatível com outros produtos da Kuraray Noritake (Panavia SA luting Multi e Clearfil DC Core Plus)
- ✓ Indicado para todas Técnicas de Condicionamento
- ✓ Várias Aplicações Clínicas

3. Alta resistência de união


- ✓ A exclusiva tecnologia RAPID BOND oferece resultados consistentes e previsíveis.
- ✓ Liberação de Fluor - Maior resistência à cáries secundárias
- ✓ Virtualmente sem nenhuma sensibilidade pós-operatória.

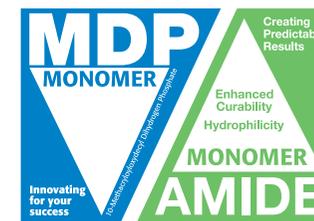

02

CLEARFIL™
TRI-S BOND
Universal Quick

Adesivo Universal

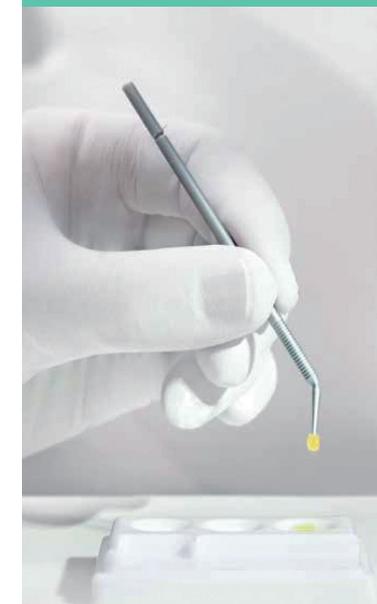

03

CLEARFIL™ AP-X ES-2

Resina composta
modelável

CLEARFIL™ AP-X ES-2



O CLEARFIL™ AP-X ES-2 é uma resina composta, nanohíbrido, ideal para aplicação anterior e posterior, graças à nossa tecnologia de partículas de carga. A escolha do tom certo nunca foi mais precisa.

Com o CLEARFIL™ AP-X ES-2, foi introduzido o sistema de escolha de tom exclusivo baseado em “luminosidade valor” intuitivos, aprovado pela VITA para compósito diretos.

Esta abordagem é a chave para conseguir uma estética natural para suas restaurações diretas.

CLEARFIL™ AP-X ES-2 seringa

#3790-WD

Todas as seringas têm 3.6g / 2.0ml, exceto as tonalidades PREMIUM Translucent Clear, Amber, Blue e Gray que possuem 1.8g /0.9ml.

CLEARFIL™ AP-X ES-2 seringa Profissional Kit

#3790-WD

12 ser. 3.6g/2.0ml (A1; A2; A3; A3.5; A1E; A2E; A3E; A3.5; A1D; A2D; A3D; A3.5D), 4 ser. 1.8g/0.9mL (Clear, Amber, Blue,gray), 1 Guia de cor



mais informações

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

VANTAGENS PARA DENTISTAS E PACIENTES

1. Fácil harmonização de cores

- ✓ Estética natural devido a mimetização com a estrutura dental adjacente.
- ✓ Tecnologia de difusão de luz
- ✓ Fluorescência e opalescência naturais

2. Recursos fáceis de restauração estética


- ✓ Tempo de trabalho longo
- ✓ Sem mudança de cor após a polimerização

3. Sistema Premium. Estratificação simples.

- ✓ Somente 5 combinações de cores de esmalte e dentina cobrem as 15 cores clássicas da escala Vita

4. Cores

- ✓ Gama de cores variada, incluindo 4 cores de PREMIUM Translucent para caracterizar as suas restaurações a um nível avançado

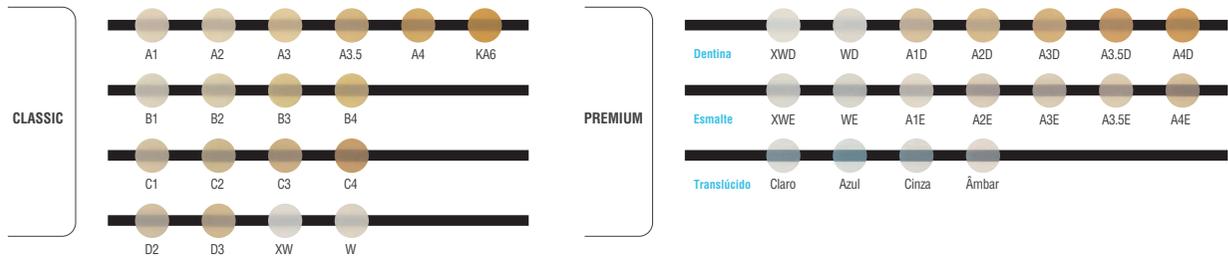

04

CLEARFIL™ AP-X Esthetics Flow

Resina composta
fluida

CLEARFIL™ AP-X Esthetics Flow



O CLEARFIL™ AP-X Esthetics Flow é um novo resina fluido universal, fotopilimerizável, para uma ampla gama de aplicações. Com sua durabilidade e estética superiores, o CLEARFIL™ AP-X Esthetics Flow pode ser utilizado para todas as classes de cavidade, inclusive restaurações em superfície oclusal. O CLEARFIL™ AP-X Esthetics Flow contém partículas de carga especiais que são tratadas com um agente de acoplamento de silano patenteado proporcionando propriedades mecânicas excelentes e alta retenção de brilho ao produto.

CLEARFIL™ AP-X Esthetics Flow

Todas as seringas têm 2.7g / 1.5ml



mais informações



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

VANTAGENS PARA DENTISTAS E PACIENTES

1. Fácil Polimento

- ✓ Alto Brilho
- ✓ Retenção do brilho por mais tempo

2. Difusão de luz


- ✓ Harmonização da cor
- ✓ Estética superior

3. Alto conteúdo de carga

- ✓ Propriedades Mecânicas Superiores
- ✓ Ótima consistência
- ✓ Alta concentração das partículas de carga (75% peso, 59% volume)

4. Cores

- ✓ Gama de cores variadas, incluindo 2 cores de dentina.

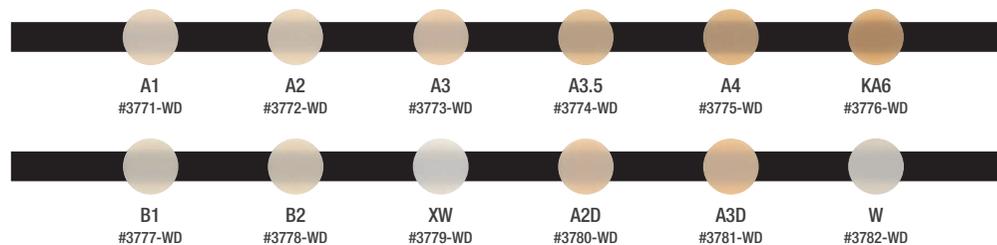


05

CLEARFIL™
ST OPAQUER

resina composta
opaca
fotopolimerizável

CLEARFIL™ ST OPAQUER

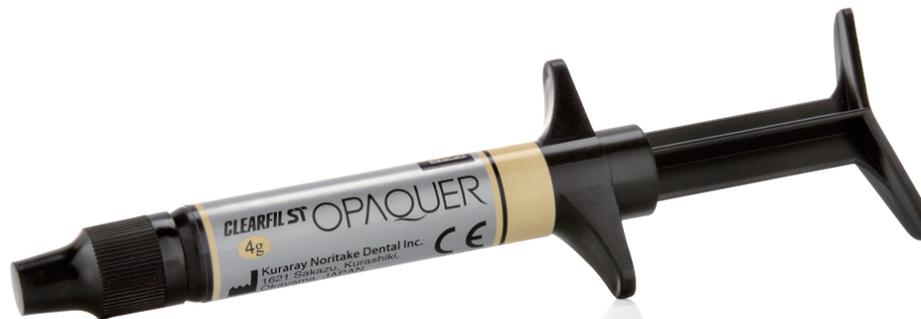

CLEARFIL™ ST OPAQUER

#636-WD CLEARFIL™ ST
OPAQUER L

#637-WD CLEARFIL™ ST
OPAQUER US



mais informações

CLEARFIL™ ST OPAQUER é uma resina opaca fotopolimerizável, especialmente indicada para mascarar metal ou dentes descoloridos

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

1. Alta opacidade

2. Indicações

VANTAGENS PARA DENTISTAS E PACIENTES

- ✓ Mascaramento imediato de substratos escurecidos com apenas uma única aplicação.
- ✓ Embalagem econômica com 4g.

- ✓ Mascaramento do metal durante o reparo intraoral de porcelana coroas de metal fundido
- ✓ Mascaramento de metal na restauração de coroas de pinos e núcleos
- ✓ Clareamento de dentes manchados ou descoloridos em porcelana ou restauração de faceta composta
- ✓ Mascaramento de materiais de capeamento pulpar



CLEARFIL™ DC CORE PLUS



CLEARFIL™ DC CORE PLUS

#2942-WD Dentin

#2943-WD White

Conteúdo: Seringa automix (1)

• Pasta A (8,9 g, 4,5 ml)

• Pasta B (9,0 g, 4,5 ml)

Pontas de mistura (20)

Pontas de guia (L) (10)

Pontas de guia (S) (10):



06

CLEARFIL™
DC CORE PLUS

núcleo de
preenchimento

CLEARFIL™ DC CORE PLUS é uma resina compasta dual para construção de núcleo de preenchimento e cimentação de pinos

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

1. Um produto, dois procedimentos

2. Aplicação mais rápida, fácil e com menos desperdício.

3. Cores

VANTAGENS PARA DENTISTAS E PACIENTES

- ✓ Cimentação de pinos & Confeção de núcleo de preenchimento.
- ✓ Excelente resistência à tração e compressão (carga de 74 wt% peso/ 52% vol.); Polimerização dual (química e foto); Radiopaco; Dureza semelhante à dentina.

- ✓ Compatível com Clearfil S3 Bond Universal Quick
- ✓ Maior viscosidade e excelente tixotropia, facilitando a remoção dos excessos.
- ✓ Disponível em seringa de automistura



Dentin



White

07


KATANA™
Zirconia BLOCK

KATANA™ Zirconia BLOCK

MULTI
LAYERED



STML Super Translucent Multi Layered

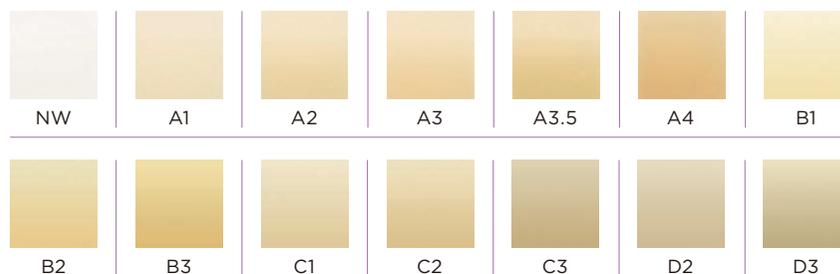


KATANA™ MEETS CEREC® UMA NOVA SOLUÇÃO CHAIRSIDE

Para uso em consultório
Apenas 18 minutos de sinterização
Para uso com sistema CEREC® CAD/CAM

TAMANHO DO BLOCO

Tamanho	a (altura)	b (largura)	C (comprimento)
12Z	15.3mm	19.2mm	20.2mm
14Z	17.8mm	19.2mm	20.2mm
14Z L	17.8mm	19.2mm	40.0mm

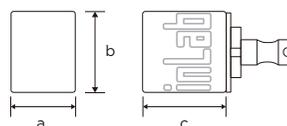

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

VANTAGENS PARA DENTISTAS E PACIENTE

1. Procedimento Rápido

- ✓ Aproximadamente 5 minutos para escaneamento intraoral, 5 minutos para o desenho do projeto, 15 minutos para frezagem, 18 minutos para sinterização (em um caso envolvendo uma única coroa após frezagem à seco), e 20 minutos para polimento ou 10 minutos para o glaze.
- ✓ Possibilidade de tratamento em sessão única

2. Bloco em Múltiplas Camadas

- ✓ O produto consiste em quatro camadas de zircônia em tons graduados. A translucidez diminuiu gradualmente de incisal para a região cervical, aumentando o nível de mascaramento na região cervical.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO


Nosso monômero adesivo MDP original adere especialmente bem à zircônia. A adesão conflável do KATANA™ Zirconia Block à estrutura do dente pode ser obtida com o uso do CLEARFIL™ SA Luting Multi ou do PANAVIA™ V5, ambos com a tecnologia do monômero MDP.



PANAVIA V5



PANAVIA SA LUTING Multi

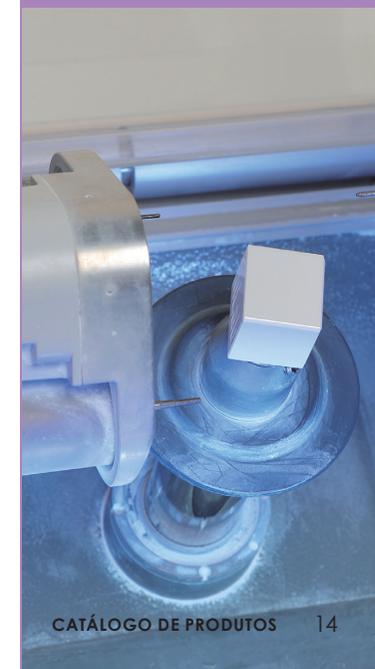

08

*CLEARFIL™
CERAMIC
PRIMER PLUS*

pré-tratamento

CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS



**CLEARFIL™ CERAMIC
PRIMER PLUS 4ml
#3637-WD**



CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS é um primer universal para próteses dentárias de uso intra e extraoral.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

**Aplicação em passo único:
sem necessidade de mistura**


VANTAGENS PARA DENTISTAS E PACIENTES

- ✓ Pré-tratamento para restaurações de cerâmica, cerâmicas híbridas, resina composta ou metal.
- ✓ O MDP original e o agente de união silano YMPS garantem uma forte adesão. Uso simples, sem a necessidade de utilizar produtos adicionais (aplicar e secar)
- ✓ Pode ser aplicado intraoralmente

ALLOY PRIMER



ALLOY PRIMER 5ml
#064-WD

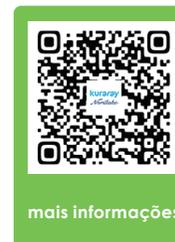

09

ALLOY PRIMER

pré-tratamento

ALLOY PRIMER é um agente de pré-tratamento condicionante para metal e é utilizado para assegurar a capacidade adesiva de resinas e éster acrílico ao ouro, titânio e outras ligas dentárias.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

1. Composto pelos monômeros
10MDP e VBATDT

2. Uso intra e extraoral

VANTAGENS PARA DENTISTAS E PACIENTE

- ✓ Aumenta a adesão ao metal
- ✓ Aumento da resistência de união ao ouro e aos metais semi-preciosos
- ✓ Basta aplicar uma camada fina à superfície do metal e deixar agir por 5 segundos

- ✓ Ideal para consertos de porcelana fraturada na cavidade oral e para aplicação em peças de zircônia antes da cimentação

10

PANAVIA™ V5

*cimento resinoso
dual com primers*

PANAVIA™ V5



UM CIMENTO SIMPLES E ESTÉTICO PARA SUAS NECESSIDADES

PANAVIA™ V5: Um Cimento Simples e Estético PARA Todas Suas Necessidades! O PANAVIA™ V5 é a 5ª versão de cimento da família PANAVIA™. É um cimento estético universal, com estabilidade de cor, com liberação de flúor, de polimerização dual real, de aplicação simplificada. O PANAVIA™ V5 também é um marco adesivo, fornecendo resistências adesiva quando autopolimerizado iguais ao agente de ligação fotopolimerizável “Gold Standard”, CLEARFIL™ SE BOND

PANAVIA™ V5 Professional Kit

#3600-WD

PANAVIA™ V5 Introductory Kit

#3604-WD Universal(A2)

#3605-WD Clear

PANAVIA™ V5 Color Kit

#3641-WD Universal(A2) e Clear

#3642-WD Universal (A2)

#3643-WD Clear

#3644-WD Brown (A4)

#3645-WD White

#3646-WD Opaque



mais informações

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

1. Cimento Estético

VANTAGENS PARA DENTISTAS E PACIENTES

- ✓ Formulação livre de amina terciária - não há alteração de cor
- ✓ Fluorescência Natural
- ✓ Ampla variedade de cores, com pastas de Try-in disponíveis



Universal
(A2)

Clear
(Claro)

Brown
(Marrom (A4))

White
(Branco)

Opaque
(Opaco)

Somente autopolimerização

2. Simples, Fácil de Usar

- ✓ 3 passos simples para cimentar todas as suas restaurações
- ✓ Um Cimento, todas as indicações. Inclusive Facetas.

3. Excelente Resistência de União


- ✓ O PANAVIA™ V5 inclui o monômero MDP original, que tem uma resistência de união excepcional comprovada em pesquisas realizadas ao longo de 15 anos.



PANAVIA™
F2.0

cimento resinoso
dual com primers

PANAVIA™ F2.0

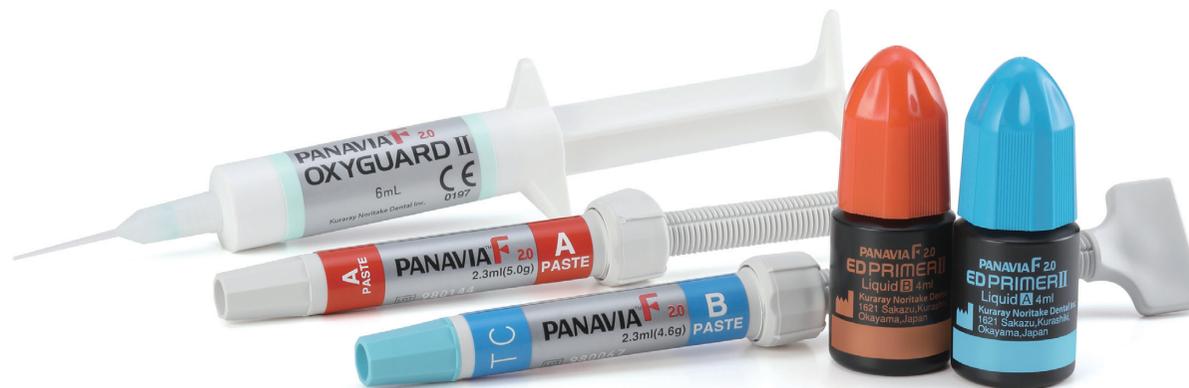

O PANAVIA™ F2.0 é um cimento resinoso com liberação de flúor, de polimerização dual. O PANAVIA™ F2.0, como com todos os cimentos resinosos Panavia, contém o mesmo monômero com adesivo MDP patenteado, que tem sido comprovado com mais de 20 anos de uso clínico. Além da resistência de união legendária com materiais de restauração metálicos, este monômero também proporciona uma adesão mais forte a todas as restaurações com cerâmica de óxido metálico (Zircônia, Alumina, etc.).

PANAVIA™ F2.0 HALF kit

#505-WD TC

#506-WD White

#508-WD Light

1 ser. 2.1g / 1ml Paste A,
1 ser. 2.1g / 1ml Paste B),
2 frascos 1ml (ED Primer II A&B),
Placa de mistura,
Espátula de mistura



mais informações

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

1. Alta resistência de união

- ✓ O exclusivo monômero adesivo MDP da Kuraray no primer cria uma forte ligação química com a hidroxiapatita.

2. Sistema exclusivo de primer autocondicionante

- ✓ Condicionamento leve, reduzindo a chance de sensibilidade pós-operatória.
- ✓ Sistema catalisador acelera a polimerização do cimento na interface dente/cimento reduzindo as tensões de contração de polimerização.

3. Propriedades anaeróbicas.

- ✓ Polimeriza, mesmo na ausência de luz

4. Disponível em Quatro Cores



12

PANAVIA™ SA LUTING Multi

cimento resinoso dual autoadesivo

PANAVIA™ SA LUTING Multi



O PANAVIA™ SA LUTING Multi é um cimento resinoso autoadesivo, de polimerização dual, que contém os monômeros LCSi e MDP exclusivos que aderem a virtualmente qualquer material, inclusive vitrocerâmica e zircônia, sem a necessidade de primers separados. Ele proporciona uma técnica de limpeza mais fácil com menor tempo na cadeira.

PANAVIA™ SA LUTING Multi Handmix

- #4272-WD Universal(A2)
- #4273-WD White
- #4274-WD Translucent

1 ser. dupla. 9,3g/5ml Paste A&B

PANAVIA™ SA LUTING Multi AUTOMIX

- #4287-WD Universal (A2)
- #4288-WD (White)
- #4289-WD (Translucent)

Seringa 1x: Pasta A e B 8,2 g (4,6 mL) Pontas de Mistura 20x



mais informações

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

1. Procedimento rápido

- ✓ Sem necessidade de nenhum Primer ou silano aplicados na peça.
- ✓ Contém Silano na pasta.

2. Praticidade

- ✓ Mecanismo exclusivo de remoção dos excessos controlada por catalisador, Easy clean up


3. Compatível com Clearfil S3 Bond Universal Quick

- ✓ Maior versatilidade. A utilização do Clearfil S3 Bond Universal aumenta a resistência de união, possibilitando o uso do produto em casos menos retentivos.


4. Duas Formas de Apresentação


- ✓ Versão Automix: Mais Convenientes
- ✓ Versão Handmix: Mais Econômicas

5. Disponível em três cores

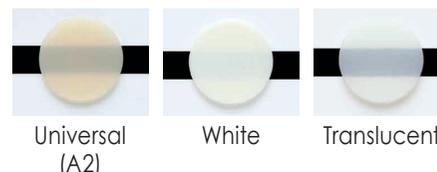

MEMO

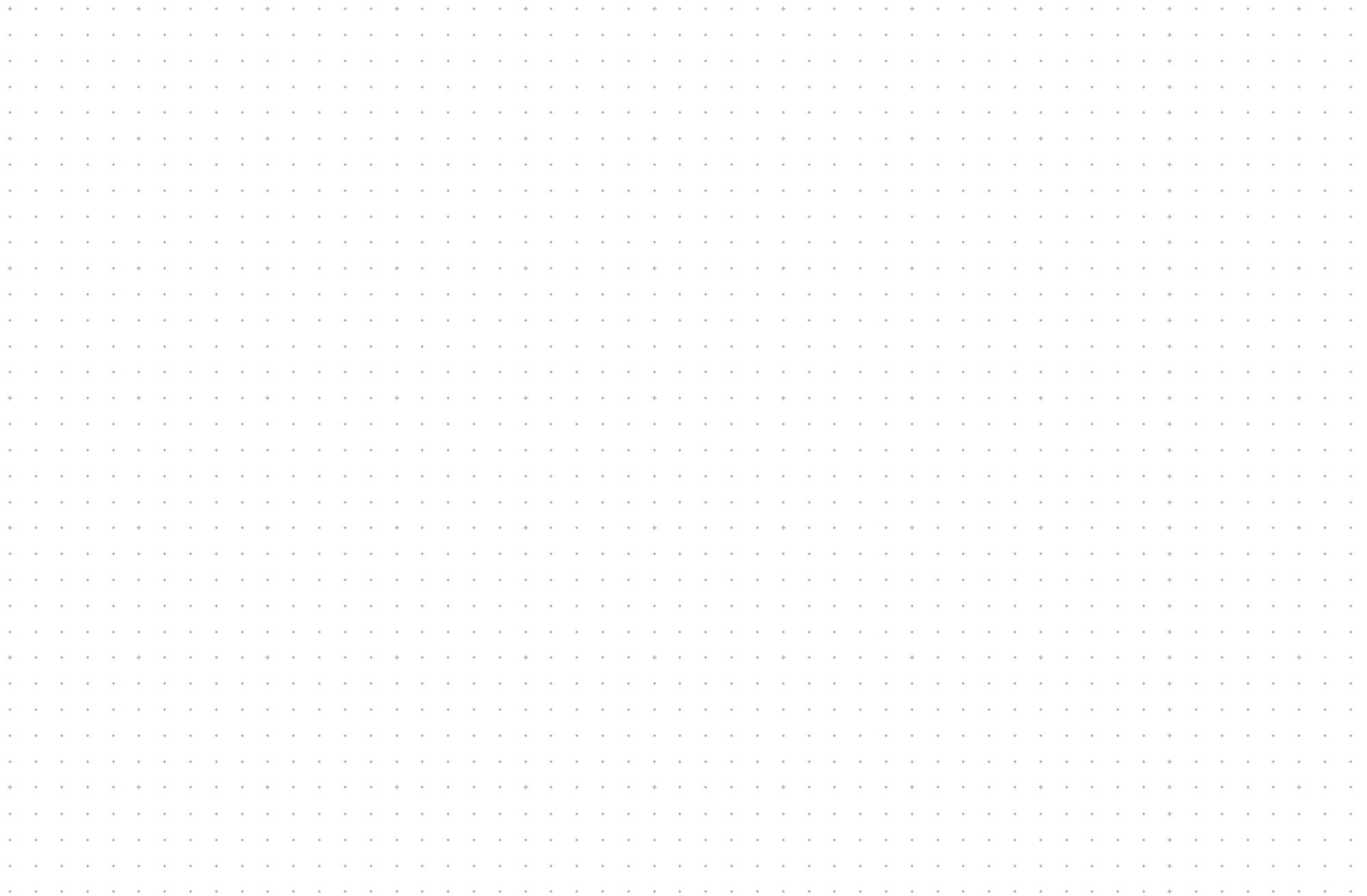

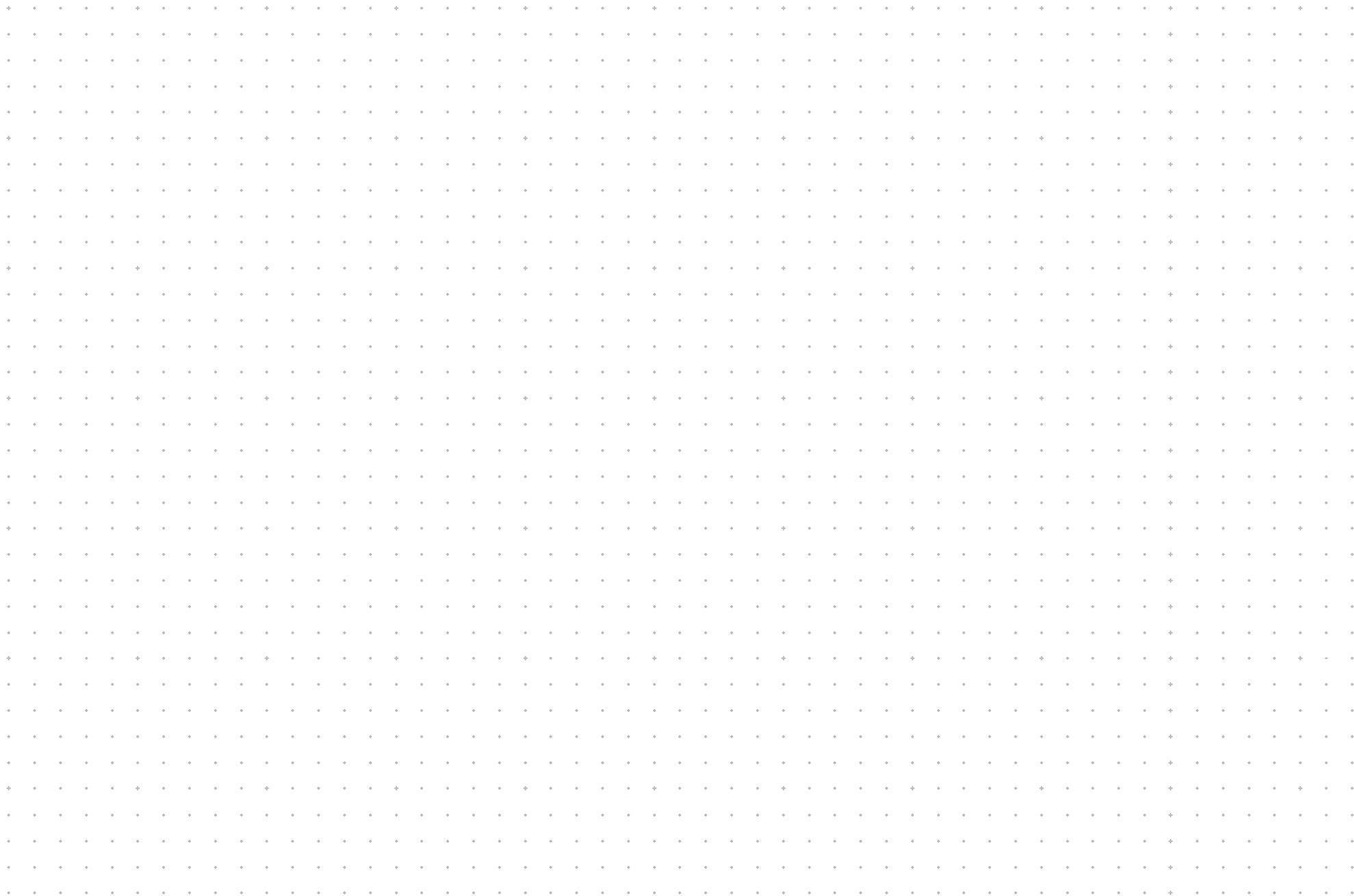

KURARAY NORITAKE DENTAL INC.

Um século servindo a humanidade



1904
NORITAKE CO., LTD.
FOI FUNDADA



1926
KURARAY CO., LTD.
FOI FUNDADA




2012
KURARAY NORITAKE DENTAL INC.
FOI FUNDADA

A Kuraray Noritake Dental Inc. é uma afiliada da KURARAY CO., LTD. que desenvolve materiais dentários

A unidade de negócios desenvolve materiais dentários e médicos


3 bases estratégicas cobrindo a Europa, América e China.
1 Sede no Japão

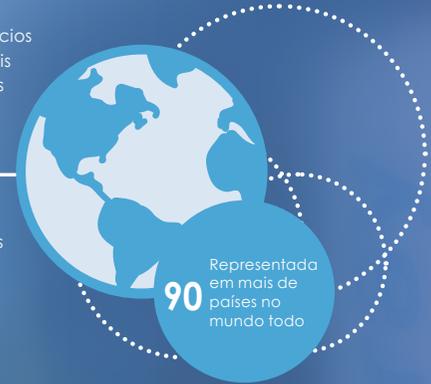

90
Representada em mais de países no mundo todo

PESQUISA E DESENVOLVIMENTO

Histórico de inovação dental de 40 anos.

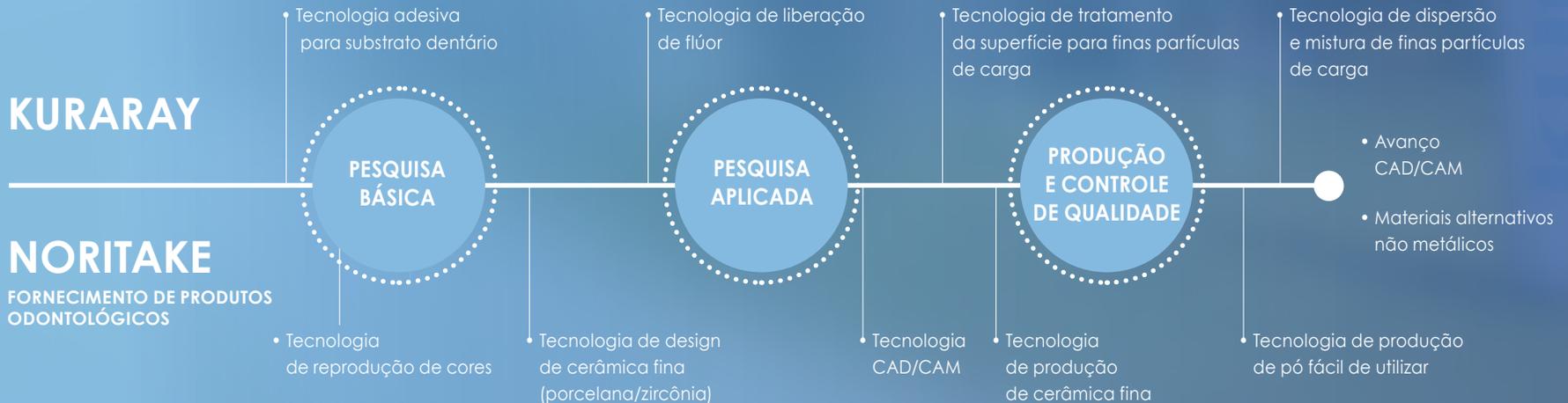

Kuraray Noritake Dental Inc.

1621 Sakazu, Kurashiki, Okayama 710-0801, Japan

Website www.kuraraynoritake.com

- Leia as Instruções de Uso fornecidas com o produto antes de utilizar.
- As especificações e a aparência do produto estão sujeitas a modificações sem aviso prévio.
- A cor impressa pode diferir ligeiramente da cor real.

"CLEARFIL", "PANAVIA", são marcas comerciais da KURARAY CO., LTD.
"KATANA" and "CERABIEN" are trademarks of NORITAKE CO., LIMITED.
"CEREC" and "SpeedFire" are trademarks of Dentsply Sirona Inc.

Importado no Brasil por:

KURARAY SOUTH AMERICA LTDA.

Av. Paulista N°1636, sala 405, Bela Vista, CEP: 01310-200-São Paulo/SP
CNPJ 31.116.239/0001-55

2023/9 CW20-01